



## Optilene®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial  
aus Polypropylen und Polyethylen

## Dermaslide®

Die Nadel mit der exklusiven Golfball-Technologie

# Optilene®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polypropylen und Polyethylen

Das neue Material und das spezielle Extrusionsverfahren verschaffen Optilene® ein verbessertes Handling.

## EIGENSCHAFTEN

<b>Material</b>	Polypropylen und Polyethylen nicht resorbierbar
<b>Beschichtung</b>	keine
<b>Fadenaufbau</b>	monofil
<b>Farbe</b>	blau
<b>Stärke</b>	USP 0 – 10/0
<b>Sterilisation</b>	Ethylenoxyd

## INDIKATIONEN

Optilene® ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäss chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders:

- beim Hautverschluss
- in der Dentalchirurgie
- in der Plastischen Chirurgie
- in der Hernienchirurgie
- in der Gefässchirurgie

### Dermaslide® Nadeln


Details auf nachfolgenden Seiten


### Blaufärbung

Sehr gute Visibilität des Fadens im Operationsbereich

### Weiche und geschmeidige Oberfläche

Einfaches Handling, hervorragender Knotenlauf und eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften

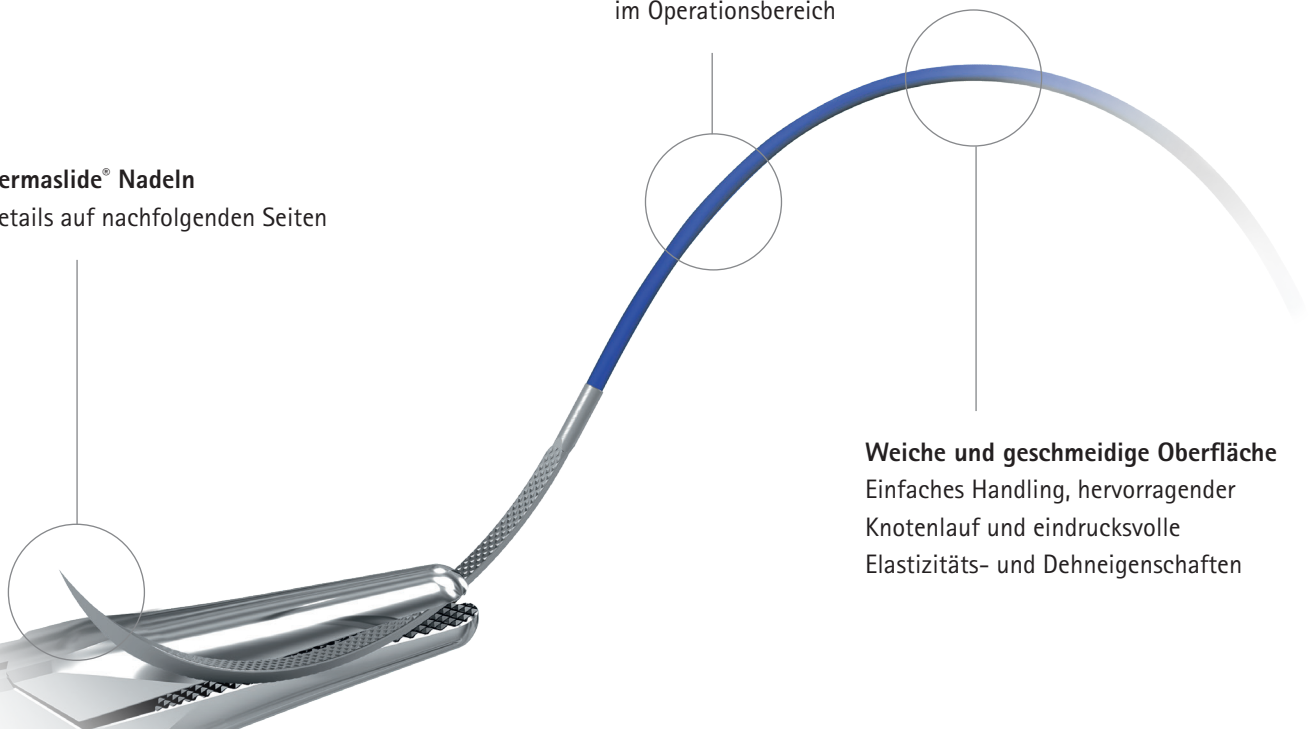

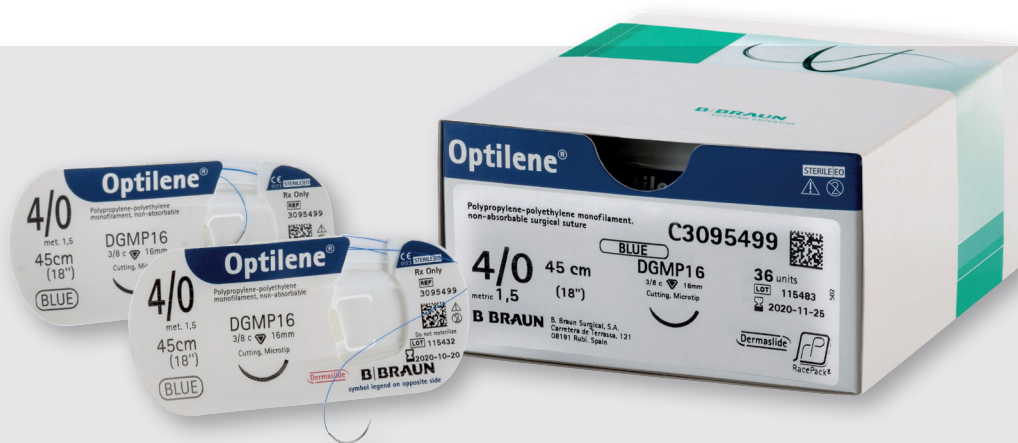


## HERVORRAGENDES HANDLING

Eigenschaften	Vorteile
Weiche und geschmeidige Oberfläche	▪ Hervorragender Knotenlauf
Hervorragender Gewebedurchzug	▪ Minimales Gewebetrauma
Höherer Komfort durch geringeres Curling	▪ Auch für festere Gewebestrukturen geeignet
Permanent hohe Reissfestigkeit	▪ Wirtschaftliches Arbeiten
Besonders gute Knoteneigenschaften	▪ Sehr guter Knotensitz
Eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften	▪ Hohe Biegefähigkeit und damit sehr hohe Flexibilität
Blaufärbung	▪ Sehr gute Visibilität des Fadens im Operationsbereich
DermaSlide® Nadeln	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eindrucksvolles Gleitverhalten durch alle Gewebestrukturen</li> <li>▪ Reduzierter Kraftaufwand, auch nach wiederholtem Einstechen</li> <li>▪ Dauerhafte Nadelschärfe</li> <li>▪ Herausragende Nadelstabilität</li> <li>▪ Hervorragender Halt im Nadelhalter</li> <li>▪ Exzellentes kosmetisches Ergebnis</li> </ul>
RacePack®	▪ Leichtere Entnahme mit reduziertem Memory-Effekt
Viele Kleinpackungen mit je 12 Fäden	▪ Bei geringem Verbrauch wenig Lagerplatz und geringere Kosten

# Dermaslide®

## Die neue Nadel mit der exklusiven Golfball-Technologie

Die spezielle Golfball-Technologie verschafft der neuen Dermaslide® Nadel ein aussergewöhnliches Handling für ein exzellentes kosmetisches Ergebnis. Mit hochwertiger Stahllegierung L300 Quality Steel.

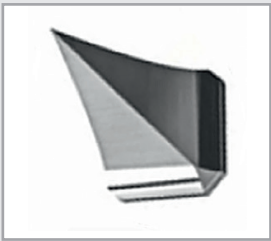


**Zweiseitig geschliffene Mikropräzisionsspitze**  
erleichtert das Einstechen und verringert somit das Gewebetrauma.




**Silikonbeschichtung**  
erlaubt der Nadel ein sanftes Gleiten durch das Gewebe.



**Spezieller Glättungsschliff**  
ermöglicht einen angenehmen Durchzug und nutzt sich nicht ab.

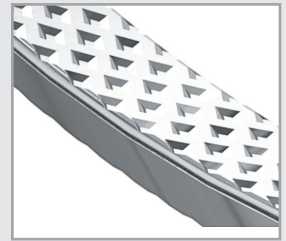


**Mikro-Gravur**  
in der Golfball-Technologie für reduzierten Gewebewiderstand.

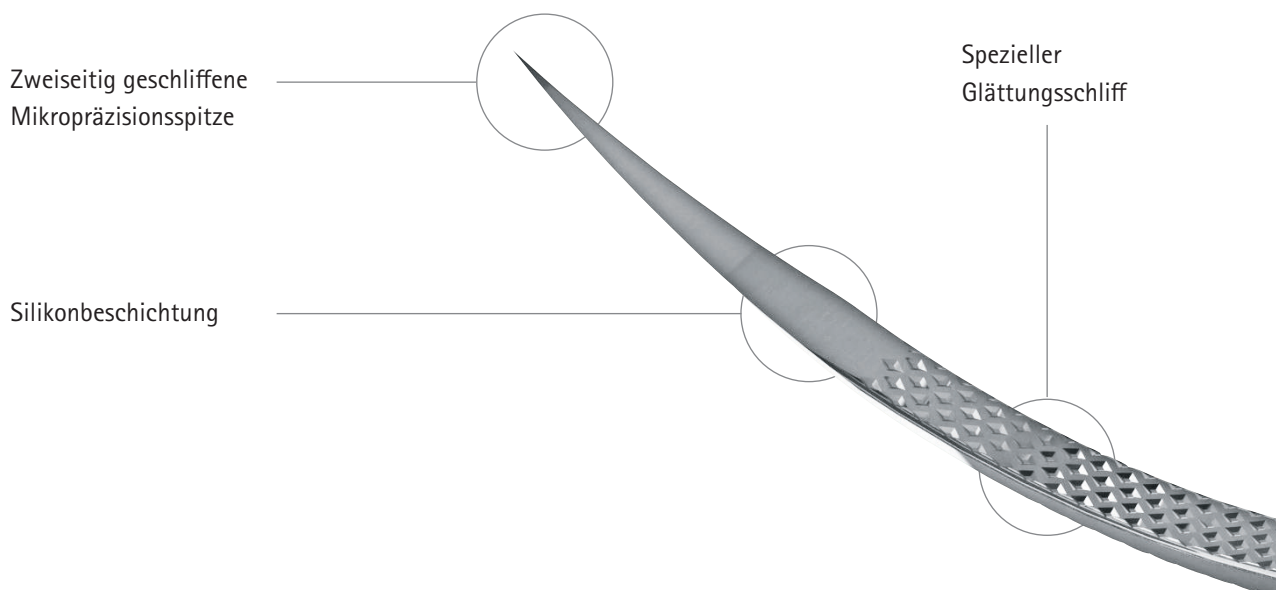




**Einzigartiger trapezförmiger Nadelkörper** reduziert das Gewebetrauma und ermöglicht stabilen Halt im Nadelhalter.

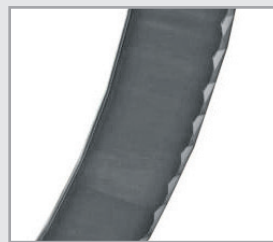

**Zusätzliche Wärmebehandlung** bietet eine ausgewogene Balance zwischen Bruch-sicherheit und Dehnbarkeit der Nadel





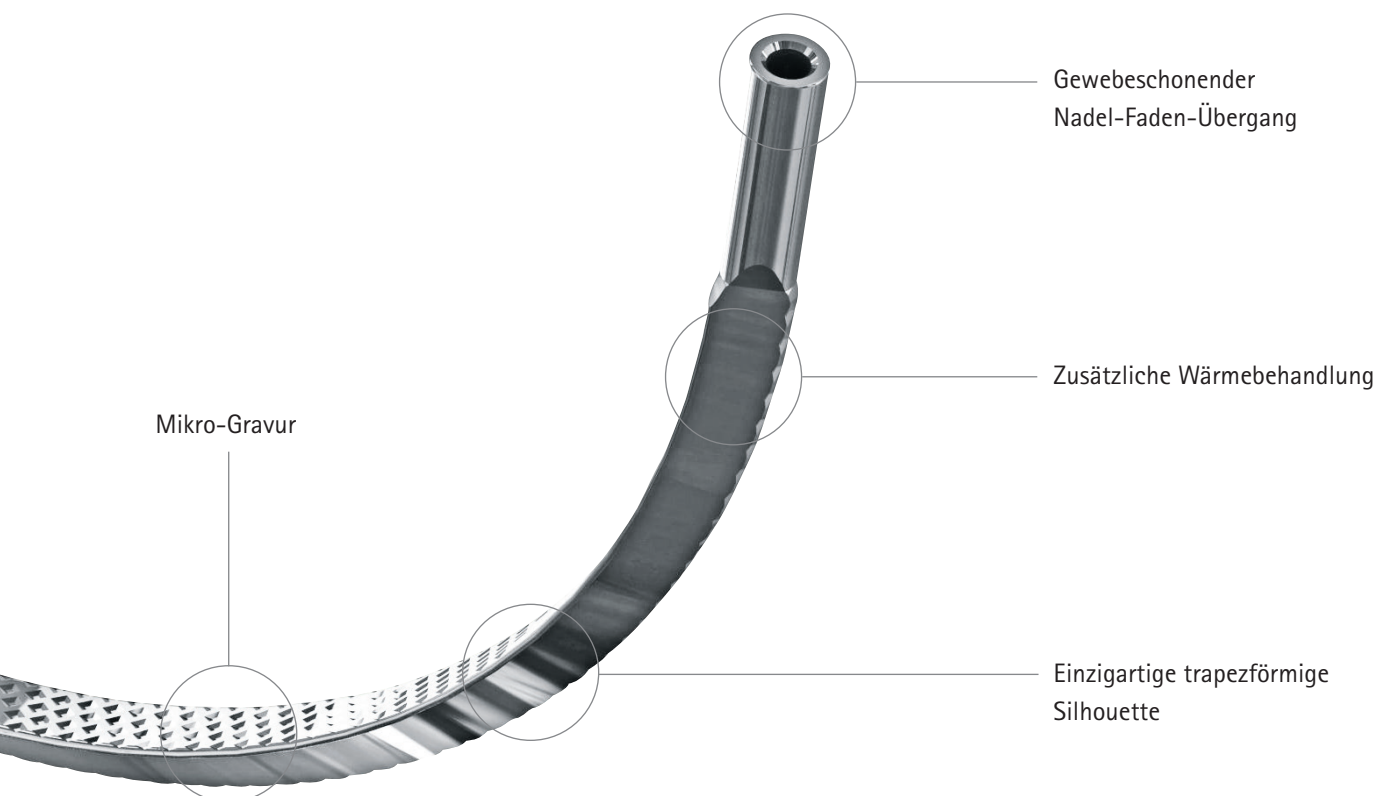

#### VORTEILE







- Eindruckvolles Gleitverhalten durch alle Gewebestrukturen
- Reduzierter Kraftaufwand, auch nach wiederholtem Einstechen
- Dauerhafte Nadelschärfe
- Herausragende Nadelstabilität
- Hervorragender Halt im Nadelhalter
- Exzellentes kosmetisches Ergebnis



# Optilene®

## Nadel-Faden-Kombinationen

Nadel: 3/8 Kreis Schneidende Dreikantspitze	Faden	Stück	Fadenstärke metric/USP				
			0.7 6/0	1 5/0	1.5 4/0	2 3/0	
DS 12		45 cm, blau	12	G3090206	G3090207		G3090205
DS 12		45 cm, blau	36			C3090208	
DS 16		45 cm, blau	12		G3090212	G3090213	
DS 16		45 cm, blau	36				C3090214
DS 19		45 cm, blau	12		G3090219	G3090220	G3090221
DS 24		45 cm, blau	12			G3090434	G3090435


Nadel: 3/8 Kreis Schneidende Dreikantspitze Mikrospitze	Faden	Stück	Fadenstärke metric/USP				
			0.7 6/0	1 5/0	1.5 4/0	2 3/0	
DSMP 11		45 cm, blau	12	G3090607	G3090608		
DSMP 13		45 cm, blau	12	G3090618	G3090619	G3090620	
DSMP 16		45 cm, blau	12		G3090629	G3090630	
DSMP 19		45 cm, blau	12		G3090675	G3090676	G3090677
DSMP 24		45 cm, blau	36		C3095654	C3090655	
DSMP 24		45 cm, blau	12				G3090656










Easyslide steht für dauerhafte Nadelschärfe – vom ersten bis zum letzten Stich – und damit für zügiges Nähen mit kleinem Materialverbrauch. Die Präzisionsspitze sorgt für sicheres, atraumatisches Nähen und beste kosmetische Resultate.



Hochpräzisions mikrogravierte plastische Chirurgenadel

Nadel: 1/2 Kreis Schneidende Dreikantspitze	Faden	Stück	Fadenstärke metric/USP				
			0.7 6/0	1 5/0	1.5 4/0	2 3/0	
HS 21		45 cm, blau	36				C3090261

Nadel: 3/8 Kreis Mikro-Gravur Mikrospitze	Faden	Stück	Fadenstärke metric/USP				
			0.7 6/0	1 5/0	1.5 4/0	2 3/0	
DGMP 11		45 cm, blau	12	G3095588			
DGMP 13		45 cm, blau	12	G3095589	G3095518	G3095910	
DGMP 16		45 cm, blau	12		G3095549		
DGMP 16		45 cm, blau	36			C3095499	
DGMP 19		45 cm, blau	36		C3095550	C3095500	C3095591
DGMP 19		75 cm, blau	36			C3095517	C3095983
DGMP 24		45 cm, blau	36			C3095717	C3095706

#### Nadelcode

D = Dreiachtelkreis | H = Halbkreis | ▼ S = Schneidende Dreikantspitze | G = Mikro-Gravur Golfball-Technologie  
 ▼ MP = Mikrospitze | Zahl = Gestreckte Nadellänge in mm

#### Art. Nr.

G = 12er-Packung | C = 36er-Packung

## Optilene® mit RacePack® Verpackung

Ein hervorragendes monofiles Nahtmaterial für den Wundverschluss



RacePack®

#### VORTEILE

- Verbesserte Entnahme von Nadel und Faden
- Verminderung des Memory-Effekts durch ovale Wicklung des Fadens in der Verpackung
- Vermeidung von möglichen Defekten am Faden
- Alle relevanten Informationen sind gut lesbar auf der Innenverpackung abgedruckt



# DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Wir sind gerne für Sie da!



Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf  
[www.sutures-bbraun.ch](http://www.sutures-bbraun.ch) (Allgemeinmedizin)  
[www.dental-bbraun.ch](http://www.dental-bbraun.ch) (Zahnmedizin)

Dieser Katalog enthält einen Ausschnitt des B. Braun-Sortiments, das Sie bequem über den Gross- und Fachhandel beziehen können. Sollte Ihr gewünschtes Produkt im Katalog nicht aufgeführt sein, fragen Sie Ihren bevorzugten Händler. Sie können auch gerne unseren Sales Support unter der Tel. Nr. 0848 83 00 33 oder Fax 0800 83 00 32 kontaktieren.

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com) | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)